

MOMCOZY

Nešiojamas belaidis pientraukis M6 / M6 dvigubas*

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

(skirta naudojimui namuose)



Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pientraukio naudojimą ir išsaugokite ją ateičiai.

* **Pastaba:** M6 dvigubas pientraukis sudarytas iš dviejų M6 pientraukių, sukomplektuotų viename laikymo dėkle.

TURINYS

1. SUSISIEKITE SU MUMIS.....	3
2. PIENTRAUKIO NAUDOJIMO PASKIRTIS.....	3
3. SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮSPĖJIMAI.....	3
4. NAUDOJIMO INDIKACIJOS IR PASKIRTIS.....	4
5. KONTRAINDIKACIJOS.....	4
6. SAUGUMO INFORMACIJA.....	4
7. KOMPLEKTACIJA.....	7
8. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	9
9. LAIKYMO SĄLYGOS.....	25
10. SPECIFIKACIJA.....	25
11. PRIEŽIŪRA IR DALIŲ KEITIMAS.....	26
12. ATITIKTIES DEKLARACIJA.....	26
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	26
14. UTILIZAVIMAS.....	28
15. GARANTIJA.....	28
16. EMC INFORMACIJA.....	28
17. NAUDOJIMAS KELIONIŲ METU IR TARPTAUTINIAI REIKALAVIMAI.....	33
18. GAMINTOJO INFORMACIJA.....	33
19. FCC ATITIKTIS.....	33

1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Dėkojame, kad renkatės MOMCOZY produktus! Dėl bet kokių gaminio problemų nedvejodami kreipkitės tiesiogiai į platintoją / pardavėją. Kontaktinę platintojo / pardavėjo informaciją rasite prekės įsigijimo dokumente.

2. PIENTRAUKIO NAUDOJIMO PASKIRTIS

MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis padeda žindančioms mamoms išgauti ir surinkti pieną. Pientraukis aplink krūties spenelį sukuria vakuumą ir taip padeda išgauti motinos pieną, kuris surenkamas į specialią talpą.

MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis turi tris režimus: stimuliacijos, pieno nutraukimo ir mišrųjį. Stimuliacijos režimu pientraukis veikia greitais ir trumpais impulsais, taip atlaisvinami pieno latakėliai ir skatinamas pieno tekėjimas. Pieno nutraukimo režimu pientraukis veikia lėtai, kad ištrauktų visą pieną. Mišriuoju režimu pientraukis veikia greitais ir trumpais impulsais, o vėliau juos pakeičia lėti ir ilgi impulsai. Vibracija užtikrina greitesnį ir efektyvesnį pieno nutraukimą.

Norint užkirsti kelią pieno patekimui į vakuumo sistemą, pieno surinkimo talpa turi silikoningą diafragmą, kuri fiziškai atskiria pieno kelią nuo vakuumo sistemos.

Įrenginys skirtas vienam vartotojui (asmeniniam naudojimui).

3. SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮSPĖJIMAI

Šioje instrukcijoje pateikti įspėjamieji ženklai ir grafiniai simboliai skirti atkreipti jūsų dėmesį į rekomendacijas, kaip saugiai ir teisingai naudoti gaminį, kad išvengtumėte žalos sau ir aplinkiniams. Įspėjamųjų ženklų ir grafinių simbolių paaiškinimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

ĮSPĖJIMŲ IR ATSARGUMO PRIEMONIŲ SIMBOLIAI			
 Įspėjimas!	Įspėjimas informuoja apie situaciją, kuri gali sukelti sunkius sužeidimus arba mirtį; pateikia informaciją apie galimas rimtas nepageidaujamas reakcijas ir saugos pavojus.		
 Dėmesio!	Nurodo pavojų, kuris įspėja apie potencialiai pavojingą situaciją, kuri gali sukelti mažus ar vidutinio sunkumo sužeidimus vartotojui, sugadinti įrangą ar kitą turtą. Simbolis taip pat gali būti naudojamas įspėti apie nesaugius veiksmus. Tai apima tinkamą priežiūrą, reikalingą saugiam ir efektyviam įrenginio naudojimui, ir tinkamą sandėliavimą, kuris padeda išvengti įrenginio pažeidimų, kurie gali įvykti naudojimo ar netinkamo naudojimo metu.		
Kontraindikacijos	Kontraindikacijos – tai sąlygos, kurioms esant įrenginys negali būti naudojamas, nes naudojimo rizika akivaizdžiai viršija galimą naudą. Šis įrenginys negali būti naudojamas esant tam tikroms sveikatos būklėms.		
Pastabos	Atkreipia dėmesį į teisingą įrenginio naudojimą. Jei į pastabas nebus atsižvelgta, dėl neteisingo naudojimo įrenginys gali būti sugadintas.		
	CE logotipas		UKCA logotipas
	Laikyti sausi		Didžiausias leistinas sluoksnių skaičius - 5
	Taikoma BF tipo daliai		Žr. naudojimo instrukciją

	Partijos kodas		Pagaminimo data
	Gamintojo informacija: pavadinimas ir adresas		Serijos numeris
	Gamintojo pakuotė apsaugo nuo saulės šviesos poveikio		
IP22	Pirmasis skaitmuo (2): apsauga nuo kietų svetimkūnių, kurių skersmuo yra $\geq 12,5$ mm. Antrasis skaitmuo (2): apsauga nuo vertikaliai krentančių vandens lašų, kai korpusas pakreiptas iki 15° kampu.		
	Atliekos turi būti tvarkomos pagal Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus.		
	Šis įrenginys nebuvo testuotas naudojimui MR aplinkoje ir negali būti naudojamas, kai pacientai dėvi įrenginį, veikiant MR aplinkai. Laikykite jį už MRT skenerio patalpos ribų.		

4. NAUDOJIMO INDIKACIJOS IR PASKIRTIS

Naudojimo indikacijos

MOMCOZY M6 (modelis: BP311) yra skirtas žindyvių pieno nutraukimui. Įrenginys skirtas asmeniniam naudojimui, vienam vartotojui.

Numatyti vartotojai

MOMCOZY M6 gali naudoti tie vartotojai, kurie perskaitė ir suprato naudojimo instrukciją. Įrenginys skirtas naudoti namuose, už įrenginio tinkamą naudojimą ir valdymą atsako vartotojas.

Vartotojų populiacija

Žindančios moterys

Naudojimo aplinka

Namai, sveikatos priežiūros įstaiga

5. KONTRAINDIKACIJOS

MOMCOZY M6 negalima naudoti turint veikiantį implantuotą įrenginį, kurį gali veikti magnetinis laukas (pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, implantuotą kardioverterį – defibriliatorių).

6. SAUGUMO INFORMACIJA

Naudodami elektrinius prietaisus, visada laikykitės pagrindinių saugos reikalavimų, ypač jei netoliese yra vaikų.

6.1. ĮSPĖJIMAS!

1) Nenaudokite šio pientraukio, jei turite veikiantį implantuotą įrenginį, kuris gali būti paveiktas magnetinio lauko (pvz., širdies stimuliatorių, implantuotą kardioverterį – defibriliatorių). Pientraukio naudojimas gali sukelti įrenginio veikimo trikdžius arba mirtį.

2) Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems mažesnę nei vidutinis fizinį, sensorinį ar psichinį suvokimą (įskaitant vaikus) arba neturintiems pakankamai žinių ir patirties.

3) Sumažinkite elektros smūgio rizikos pavojų:

- visada atjunkite elektros prietaisus nuo tinklo iš karto po įkrovimo;
- nenaudokite elektros prietaisų maudynių vonioje ar duše metu, taip pat vairuojant ar plaukiojant;
- jei elektros prietaisas įkrito į vandenį, pirmiausia atjunkite jį nuo elektros tinklo ir tik tada išimkite.

4) MOMCOZY M6 pientraukis yra skirtas asmeniniam naudojimui dėl higienos sumetimų, todėl juo negalima dalintis su kitomis žindyvėmis ar perparduoti / atiduoti tolimesniam naudojimui kitai žindyvei. Bet kuris iš šių minėtų veiksmų panaikina garantijos galiojimą.

5) MOMCOZY M6 pientraukio naudojimas nesumažina ir nepanaikina tikimybės kūdikiui su motinos pienu perduoti hepatito B, hepatito C ar žmogaus imunodeficito (ŽIV) virusą, jei žindytė yra užsikrėtusi.

6) Naudojant MOMCOZY M6 pientraukį netoliese vaikų ar neįgaliųjų, būtina nuolatinė priežiūra. Neleiskite vaikams ar naminiams gyvūnams žaisti su pientraukio variklio bloku, pakuotės medžiagomis ar priedais.

7) MOMCOZY M6 pientraukis gali būti naudojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti paskirčiai.

8) Su MOMCOZY M6 pientraukiu naudokite tiek tuos priedus ir elementus, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

9) Visada patikrinkite maitinimo adapterį prieš krovimą. Niekada nenaudokite pažeisto maitinimo adapterio.

10) Įkrovimo metu niekada nepalikite įrenginio be priežiūros.

11) MOMCOZY M6 pientraukį ir visus jo priedus laikykite atokiau nuo karštų paviršių.

12) Nenaudokite MOMCOZY M6 miego metu ar jei galite užsnūsti.

13) Nenaudokite MOMCOZY M6 vietose, kuriose yra naudojami aerozolio purškikliai ar tiekiamas deguonis.

14) Nenaudokite MOMCOZY M6, jei netoliese yra sprogstamųjų ar degių medžiagų, taip pat magnetinio rezonanso patalpoje, hiperbarinėje kameroje, šalia židinio ar šildytuvo.

15) MOMCOZY M6 įkrovimo laikas gali sukelti pavojų užspringti.

16) Vartotojams draudžiama savarankiškai taisyti įrenginį. Bet koks savavališkas remontas panaikina garantijos galiojimą. Jei jūsų turimas prietaisas sugedo ar veikia netinkamai, kreipkitės į gamintoją ar įgaliotąjį jo atstovą.

17) Visada išjunkite MOMCOZY M6 prieš nuimant siurbtuką nuo krūties – tai panaikins susidariusį vakuumą.

18) MOMCOZY M6 pientraukis yra skirtas individualiam naudojimui. Dėl higienos sumetimų įrenginiu negalima dalintis ar jo nuomoti.

19) Nenaudokite MOMCOZY M6 nėštumo metu, nes pieno nutraukimas gali paskatinti priešlaikinį gimdymą.

20) MOMCOZY M6 dalys yra pritaikytos iki 43,9 °C temperatūrai. Pernelyg aukšta temperatūra gali sukelti odos nudegimus, todėl prieš naudojimą įsitikinkite, kad jūsų krūtų oda yra sveika ir neturi

pažeidimų. Jei jaučiate per didelį karštį, nedelsiant išjunkite pientraukį. Norint išvengti nudegimų žemoje temperatūroje, rekomenduojama, kad sesijos trukmė neviršytų 30 minučių. Tarp sesijų rekomenduojama daryti bent 5 minučių pertraukėles, kad prietaisas spėtų atvėsti.

21) **MOMCOZY M6 tarnavimo laikas (t. y. veikimo trukmė):** prietaisas neturi aiškiai apibrėžto galiojimo laiko, tačiau tikėtinas jo veikimo laikas yra 500 valandų. Plaunamų dalių naudojimo trukmė yra nuo vieno iki trijų mėnesių. Kaskart prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai. Pientraukio naudojimas pasibaigus tarnavimo laikui gali lemti netinkamą veikimą, pavyzdžiui, pientraukis nesugebės tinkamai užtikrinti vakuumo, o dėl tai gali lemti krūtų odos pažeidimus.

22) Ribotas fizinės, jutimines ar psichinės galimybes turintys asmenys arba neturintys naudojimo patirties asmenys gali naudoti MOMCOZY M6 tik tada, jei jiems buvo aiškiai ir suprantamai pateikta informacija apie pientraukio saugų naudojimą ir priežiūrą, o jie šią suprato šią informaciją ir su naudojimu susijusius pavojus.

23) Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ar jo priedais.

24) Prietaiso priežiūra ir valymą vaikai gali rūpintis tik su suaugusiųjų priežiūra.

25) Įrenginio baterijos negalima kaitinti, deginti, mechaniškai pažeisti ir perpjauti – tai gali sukelti sprogimą.

26) Nepalikite įrenginio baterijos itin aukštoje temperatūroje, nes tai gali sukelti sprogimą ir / ar degių skysčių ar dujų nuotėkį.

27) Dėl ekstremaliai žemo oro slėgio įrenginio baterija gali sukelti sprogimą, gali įvykti degių skysčių ar dujų nuotėkis.

6.2. ĮSPĖJIMAS!

- Nedėkite ir nepalikite pientraukio ten, kur jis gali įkristi ar būti įtrauktas į vandenį: vonią, kriauklę ar baseiną.

- Neapliekite ir nenardinkite pientraukio į vandenį ar kitą skystį.

- Jokiu tikslu nemerkite pientraukio į jokią skystį ir venkite ekstremalių smūgių, pavyzdžiui, kritimo.

- Jei pastebėjote, kad pienas neišsiskiria, nenaudokite pientraukio ilgiau nei 5 minutes, atidėkite sesiją vėlesniam laikui.

- Jei naudojant pientraukį jaučiate diskomfortą, nedelsiant nutraukite naudojimą. Gaubtelį galite lengvai nuimti įkišant pirštą tarp ir krūties.

- Jei atsirado sudirgimų ar jaučiate diskomfortą, nedelsiant nutraukite pientraukio naudojimą ir kreipkitės pagalbos į sveikatos priežiūros specialistą.

- Jei maitinimo adapterio korpusas ar laidas atsilaisvino, atsiskyrė ar yra matoma pažeidimų, nedelsiant nutraukite jo naudojimą ir susisieki su prietaiso platintoju / pardavėju.


- Nedelsiant nutraukite pientraukio naudojimą ar įkrovimą, jei pastebėjote dūmus ar užuodėte degėsių kvapą iš pientraukio ar maitinimo adapterio.

Įspėjimas: jei pientraukis naudojimo metu įkaito, nedelsiant nutraukite jo naudojimą ir nuimkite pientraukio gaubtelius nuo krūtų.

Pastaba: venkite laikyti prietaisą tiesioginiuose saulės spinduliuose.

7. KOMPLEKTACIJA

Gaminį sudaro pagrindinis įrenginys ir pieno surinkimo rinkinys bei kiti priedai.

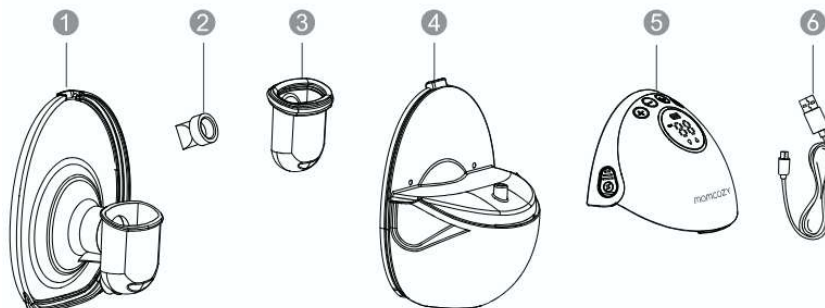

1 pav. MOMCOZY M6 komplektacija

Pientraukio komplektacija		
Nr.	Elementas	Aprašymas
1	24 mm gaubtelis	Šie elementai yra pientraukio komplektacijos dalis
2	Vožtuvas	
3	Diafragma	
4	Pieno surinkimo talpa (180 ml)	
5	Pientraukis (pagrindinis įrenginys)	Siurblio variklis
6	USB laidas (C tipo)	Įvesties galas yra USB 2.0 sąsaja, išvesties galas yra C tipo sąsaja

Kiti priedai:

17 mm gaubtelio tarpinė

19 mm gaubtelio tarpinė

21 mm gaubtelio tarpinė


Greito naudojimo gidas

Gaubtelio dangtelis

Gaubtelio dydžio matuoklė

Laikymo dėklas

Naudojimo instrukcija

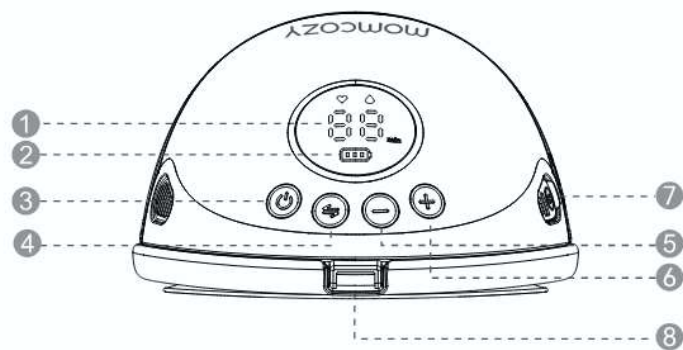

2 pav. Valdymo skydelis

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 – Veikimo laiko / siurbimo lygio ekranas | 5 – Sumažinti |
| 2 – Baterijos įkrovimo indikatorius | 6 – Padidinti |
| 3 – Įjungti / išjungti / sustabdyti (pauzė) | 7 – Įkrovimo prievadas |
| 4 – Režimo pasirinkimas | 8 – Pieno išleidimo anga |

Valdymo aprašymas		
Nr.	Mygtukai ir švieselės	Funkcijos
1		Įrenginiui įjungti ar išjungti mygtuką reikia nuspausti ir palaikyti keletą sekundžių. Trumpai spustelėkite mygtuką, jei norite sustabdyti sesiją. Sesijai pratęsti spustelėkite bet kurį mygtuką.
2		Režimo pasirinkimas
3		Sumažinti siurbimo intensyvumą
4		Padidinti siurbimo intensyvumą
5		Stimuliavimo režimas: šiuo režimu pientraukis veikia greitais ir trumpais intervalais, kad paskatintų pieno tekėjimą
6		Siurbimo režimas: šiuo režimu pientraukis veikia lėtais ir ilgais intervalais
7		Mišrus režimas: šiuo režimu pientraukis veikia tai greitais ir trumpais, tai lėtais ir ilgais intervalais
8		Siurbimo lygis: pientraukis turi 9 siurbimo lygius Veikimo laikas: 00–29 minučių (pientraukis automatiškai išsijungia po 30 minučių)
9.		Įkrovos lygio indikatorius

Įkrovos lygio indikatorius		
Žemas įkrovos lygis: mirksi pirmoji įkrovos indikatoriaus padala	Kraunama: viena po kitos mirksi visos įkrovos indikatoriaus padalos	Visiškai įkrauta: šviečia visos įkrovos indikatoriaus padalos
		


Baterijai išsikrovus prietaisas išsijungs automatiškai ir jo nebus galima naudoti, įkrovos lygio indikatorius rodydys, kad baterija yra išsikrovusi.

8. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

8.1 Įkrovimas

Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, jį pilnai įkraukite. Pientraukis maitinamas naudojant vidinę įkraunamą ličio bateriją. Mūsų gaminiai yra komplektuojami su įkrovimo laidu (USB 2.0 / C tipas), bet ne su maitinimo adapteriu. Maitinimo adapterį įsigykite atskirai. Įsitikinkite, kad maitinimo adapteris tinka USB 2.0 sąsajai ir įsitikinkite, kad jo įvesties galia yra AC 100–240 V 50/60 Hz, o išėjimo galia yra DC 5 V 1A.


- Kai mirksi pirmoji įkrovos indikatoriaus juostelė, tai reiškia, kad akumuliatorius išsikrovęs ir liko 30 minučių naudojimo laiko. Įkraukite įrenginį laiku.
- Visiškai įkrovus įrenginį galima naudoti 5–6 siurbimo sesijoms (apie 180 minučių), kai vienos sesijos trukmė – 30 minučių.

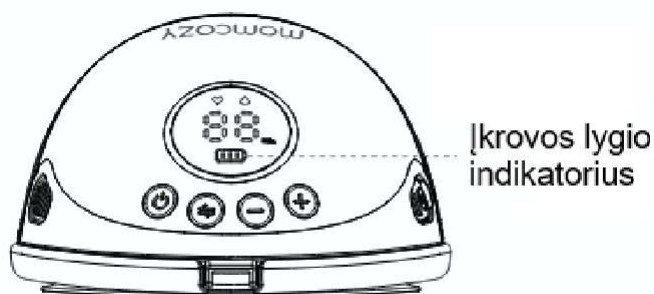

3 pav. Įkrovos lygio indikatorius

Akumuliatoriaus įkrovimas

- Įkiškite įkrovimo laido galą USB į maitinimo adapterio USB sąsają.
- Įkiškite maitinimo adapterio kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Įkiškite C tipo įkrovimo laido galą į pientraukio įkrovimo prievadą.

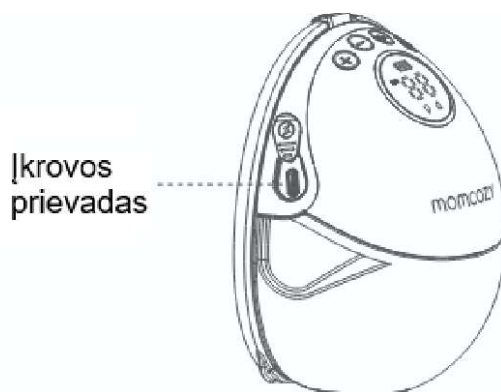

4 pav. Įkrovimo prievadas įrenginyje

Įrenginys bus visiškai įkrautas maždaug per 150 minučių.

Įkrovos lygio indikatorius			
Įkraunama pirmoji įkrovos padala: seka nuolat kartojasi iš kairės į dešinę (1 juostelė, 2 juostelė, 3 juostelė)	Įkraunama antroji įkrovos padala: 1 juostelė šviečia nuolat, indikatorius kaitaliojasi tarp 2 ir 3 juostelių	Įkraunama trečioji įkrovos padala: 1 ir 2 juostelės šviečia nuolat, 3 juostelė mirksi	Baterija yra visiškai įkrauta: šviečia visos juostelės.

Kai baterija bus visiškai įkrauta, atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo, atjunkite įkrovimo laidą nuo maitinimo adapterio ir pagrindinio įrenginio.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Pientraukio naudoti įkrovimo metu **NEGALIMA**.
- Įkrovimo laidas gali būti naudojamas tik maitinimo adapteriui ir MOMCOZY nešiojamam pientraukiui sujungti, kad įrenginį būtų galima įkrauti. Nejunkite pientraukio prie jokių kitų įrenginių, nes gali įvykti elektros iškrova.
- Jei adapterio korpusas atsilaisvina, atsiskiria ar matomi kiti nusidėvėjimo požymiai, nedelsiant nustokite jį naudoti ir susisiekite su platintoju / pardavėju.
- Jei įkrovimo laidas yra pažeistas, sulūžęs arba įtrūkęs, nedelsiant nustokite jį naudoti ir susisiekite su platintoju / pardavėju dėl laido pakeitimo nauju (kontaktnės informacijos ieškokite šios instrukcijos pabaigoje).
- Nedelsiant nutraukite pientraukio naudojimą, jei pastebėjote, kad siurblio blokas arba maitinimo adapteris įkaito, iš jo sklinda dūmai ar degėsių kvapas.

⚠ ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant netinkamo tipo arba prastos kokybės adapterį, gali sumažėti įrenginio naudojimo saugumas, taip pat gali kilti pavojus jūsų turtui ir sveikatai. Rekomenduojame įsigyti medicininį adapterį, atitinkantį IEC 60601-1 ir IEC 60601-1-2 standartus ir įsitikinti, kad maitinimo adapterio išvestis yra DC 5V 1A.

PASTABOS:

- Jei pastebėjote, kad pilnai įkrautas pientraukis veikia trumpiau nei anksčiau, nemėginkite baterijos pakeisti savarankiškai. Dėl baterijos keitimo kreipkitės į gamintoją. Savarankiškas baterijos ardymas ir keitimas gali sugadinti pagrindinį įrenginį ir bateriją.
- Jei pientraukis ilgą laiką nėra naudojamas, baterija palengva išsikrauna. Siekiant apsaugoti bateriją nuo pažeidimo dėl ilgalaikės žemos įtampos, rekomenduojame profilaktiškai įkrauti nenaudojamą pientraukį kartą per tris mėnesius.

8.2 Valymas ir dezinfekcija

8.2.1 Bendrieji patarimai / reikalavimai

Motinos pienas yra vienas svarbiausių dalykų kūdikio sveikatai ir vystymuisi užtikrinti. Pientraukis yra vienas iš būdų aprūpinti kūdikį motinos pienu. Labai svarbu, kad visos pientraukio sudedamosios dalys būtų švarios, nes mikrobai motinos piene ar jo likučiuose gali greitai daugintis. Šie valymo ir dezinfekcijos patarimai padės išvengti motinos pieno užteršimo ir apsaugoti kūdikį nuo infekcijų. Jei jūsų kūdikis gimė per anksti ar turi kitų sveikatos problemų, pasikonsultuokite su priežiūrinčia gydytoja, kad gautumėte daugiau rekomendacijų, kaip saugiai naudoti pientraukį.

1) PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ

Patikrinkite pientraukio dalių švarą prieš surinkdami. Nuvalykite pientraukį dezinfekuojančiomis servetėlėmis.

2) PO KIEKVIENO NAUDOJIMO

Motinos pieną laikykite saugiai, tam naudokite specialius maišelius ar kitas talpas pienui laikyti, maistui laikyti skirtus indus. Įsitikinkite, kad pieno laikymo indai yra pagaminti iš stiklo arba plastiko ir turi sandarius dangtelius, ant jų pažymėkite pieno nutraukimo datą. Nutrauktą pieną nedelsiant įdėkite į šaldytuvą, šaldiklį arba šaldymo maišelį su ledukais.

Išvalykite vietą, kurioje naudojote pientraukį: dezinfekcinėmis servetėlėmis nuvalykite pientraukio mygtukus, jungiklį ir stalviršį.

3) DALYS, KURIAS REIKIA NUVALYTI IR DEZINFEKUOTI


Nuvalykite ir dezinfekuokite visas dalis, kurios liečiasi su krūtimi ir motinos pienu, prieš naudodami pientraukį pirmą kartą ir po kiekvieno naudojimo.

- Su pienu kontaktuojantys elementai: pieno surinkimo rinkinio dalys, įskaitant gaubtelį, jungiklį, diafragmą, vožtuvą ir pieno surinkimo talpą.
- Dalys, kurios liečiasi tik su krūties oda: gaubtelis.

4) PRIEŠ VALANT / DEZINFEKUOJANT:

a. Prašome gerai nusiplauti rankas su muilu ir tekančiu vandeniu 20 sekundžių.

b. Išardykite visas dalis taip:

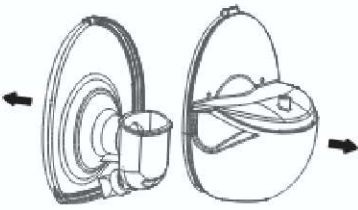 5 pav.	 6 pav.
1. Laikydami pientraukį už išsikišusių dalių, esančių abiejose pusėse, atskirkite siurblio variklį.	2. Atjunkite gaubtelį nuo pientraukio.
 7 pav.	 8 pav.
3. Atskirkite vožtuvą nuo gaubtelio.	4. Nuimkite diafragmą nuo pieno talpos.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Niekada nedėkite pagrindinio įrenginio, įkrovimo laido ar adapterio į vandenį ir neplaukite indaplovėje, nes tai gali šias dalis nepataisomai sugadinti.

8.2.2 Su pienu besiliečiančių dalių valymas ir dezinfekavimas

1 žingsnis: plovimas

Išvalykite įrenginį rankiniu būdu, neplaukite įrenginio ar jo dalių indaplovėje (saugumas nebuvo patikrintas).

ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite antibakterinių ir abrazyvių valymo priemonių pientraukio dalims, kurios turi kontaktą su krūties oda, valyti.

1) Valymui naudokite:

- muilą ir karštą vandenį
- kokybišką geriamąjį vandenį
- švarią vonelę, kuri naudojama tik pientraukio plovimui
- švarų šepetėlį, kuris naudojamas tik pientraukio valymui
- švarią medžiaginę šluostę arba popierines šluostes


2) Skalavimas: išskalaukite pientraukio dalis ir visus kitus elementus, kurie liečiasi su motinos pienu, laikydami juos po tekančiu vandeniu, kad pašalintumėte pieno likučius ir nešvarumus. Vanduo gali būti šiltas arba šaltas, pasirinkite savo nuožiūra.



9 pav. Skalavimas

3) Pientraukio plovimas

Pientraukio dalis sudėkite į švarią vonelę, skirtą tik pientraukio plovimui. Neplaukite pientraukio dalių tiesiai kriauklėje, nes joje gali būti mikrobų, galinčių užteršti šias dalis. Mirkykite pieno rinkinio dalis šiltame 40–60 °C (104–140 °F) muiluotame vandenyje 3–5 minutes.

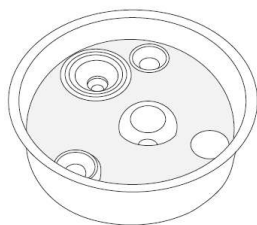


10 pav. Pientraukio dalių plovimas

Po mirkymo nušveiskite pientraukio dalis švariu šepetėliu, kuris skirtas tik pientraukio dalių valymui.

4) Išskalaukite dalis pakartotinai, laikydami po tekančiu vandeniu ar panardinę į vandenį švarioje vonelėje, skirtoje kūdikio reikmenų plovimui. Jei nešvarumų vis dar liko, išplaukite ir išskalaukite dalis dar kartą, kol jos bus švarios.

5) Kruopščiai išdžiovinkite visas dalis. Sudėkite jas ant švaraus rankšluosčio ar popierinių šluosčių ir palikite išdžiūti nuo nešvarumų ir dulkių apsaugotoje vietoje. Nenaudokite dalims džiovinti jau naudotos indų šluostės ir nesusinkite ja dalių – tai gali pernešti mikrobus.

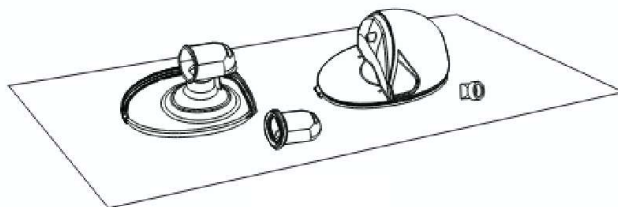

11 pav. Pientraukio dalių džiovinimas

6) Išplaukite vonelę ir šepetėlį bei palikite gerai išdžiūti po kiekvieno naudojimo. Kas keletą dienų plaukite vonelę ir šepetėlį rankomis šiltame vandenyje, naudokite ploviklį. Jei jūsų kūdikiui yra mažiau nei 3 mėnesiai, jis gimė per anksti arba jo imuninė sistema yra silpnesnė dėl ligos (pvz., ŽIV) ar gydymo (pvz., chemoterapijos nuo vėžio), vonelę ir buteliuko šepetėlį su plovikliu išplaukite po kiekvieno naudojimo.

Po plovimo

Norint pašalinti mikrobus, pientraukio dalis, plovimo vonelę ir šepetėlį būtina bent kartą per dieną dezinfekuoti. Dezinfekuokite elementus po valymo, kai jie bus švarūs. Dezinfekcijai galima naudoti verdantį vandenį. Dezinfekcija yra labai svarbi, jei kūdikis yra jaunesnis nei 3 mėnesių amžiaus, gimė per anksti arba jo imuninė sistema yra silpnesnė dėl ligos ar gydymo.

Norėdami dezinfekuot dalis, kurios turi sąlytį su pienu, atlikite 2 žingsnį.

2 žingsnis: dezinfekcija

Įspėjimas: negalima sterilizuoti pientraukio dalių mikrobangų krosnelėje arba UV sterilizatoriuje. Aukšta temperatūra (> 110 °C) sutrumpins jų tarnavimo laiką ir sukels pavojų saugai.

Prieš dezinfekuodami įsitikinkite, kad pientraukio dalys, šepetėlis ir vonelė yra švarūs, išplauti naudojant anksčiau aptartus metodus. Dezinfekuokite visus su pienu besiliečiančius elementus (net buteliuko šepetėlį ir plovimo vonelę) laikydamiesi žemiau pateiktų rekomendacijų.


1) Pasiruoškite:

- buitinį puodą;
- kokybiško geriamojo vandens;
- švarias žnyples.




Dezinfekuojuodami dalis verdančiu vandeniu, būtina vengti jų prisilietimo prie puodo šonų ar dugno. Tai gali negrįžtamai deformuoti arba sugadinti elementus.

2) Sudėkite pientraukio dalis į puodą ir pripilkite vandens. Dalys turi būti apsemtos. Užvirkite puodą ir pavirkite dalis **3 minutes**, įsitikinkite, kad jos neličia puodo kraštų.

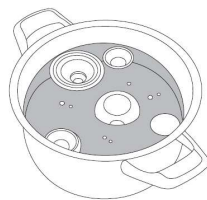


12 pav. Pientraukio dalių dezinfekavimas verdančiame vandenyje

3) Švariomis žnyplėmis po vieną išimkite dalis iš puodo.

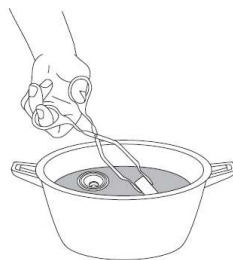

13 pav. Išimkite pientraukio dalis žnyplėmis

4) Palikite dezinfekuotas dalis laisvai išdžiūti.

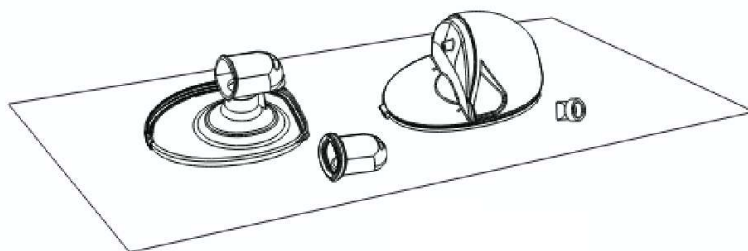

14 pav. Pientraukio dalių džiovinimas

3 žingsnis: sandėliavimas

Pientraukį laikykite saugiai padėtą, kol jo prireiks. Įsitikinkite, kad pientraukio dalys ir vonelė bei šepetėlis yra švarūs ir sausi – dėl drėgmės kyla mikrobų ir pelėsio rizika. Laikykite pientraukį saugioje vietoje, kurioje nėra taršos iš aplinkos pavojaus.

- 1) Nusiplaukite rankas su muilu ir gerai nuskalaukite vandeniu.
- 2) Įsitikinkite, kad pientraukio dalys yra švarios ir sausos, surinkite pientraukio dalis naudojimui.
- 3) Surinktą pientraukį, vonelę ir šepetėlį padėkite į švarią, nuo aplinkos taršos saugią vietą, pavyzdžiui, švariems indams laikyti skirtą virtuvės spintelę.

8.2.3 Kitų dalių valymas / dezinfekavimas

Prieš pirmą kartą naudojant ir po kiekvieno naudojimo būtina išvalyti ir dezinfekuoti pagrindinio įrenginio korpusą. Kitas dalis, kurios neturi tiesioginio kontakto su kūnu ar pienu, reikia valyti tik tada, kai jos yra nešvarios.

Elementų valymas / dezinfekavimas kambario temperatūroje 5–40 °C.

Pasiruoškite:

- dezinfekavimo priemonę;
- 70 % izopropilo alkoholio servetėlės;
- minkštą šluostę.

Valymo būdas:

1. Prieš valymą nusiplaukite ir dezinfekuokite rankas.
2. Pašalinkite visus nešvarumus nuo pagrindinio įrenginio ir (arba) įkrovimo laido švaria minkšta šluoste.
3. Paimkite gabalėlį 70 % izopropilo alkoholio servetėlės ir ja valykite dalis, kol neliks matomų nešvarumų.
4. Palikite prietaisą džiūti kambario temperatūroje apie 10 minučių, kad išgaruotų ant gaminio likęs valymo reagento tirpalas.

Dezinfekcijos metodas

Pagrindinio įrenginio korpusą nuvalykite taip, kaip aprašyta aukščiau.

1. 3 minutes dezinfekuokite pagrindinio įrenginio korpusą minkšta šluoste, sudrėkinta 70 % izopropanolio.
2. Džiovinkite pagrindinį įrenginį kambario temperatūroje 10 minučių, kol išgaruos dezinfekcinio tirpalo likučiai.

8.3 Naudojimo instrukcija

8.3.1 Paruošimas naudojimui



ĮSPĖJIMAS!


1. Nusiplaukite rankas su muilu ir tik tada apžiūrėkite bei surinkite pientraukį.

2. Sesijos trukmė:

Šis pientraukis yra maitinamas įkraunama ličio baterija, kuri pilnai įkrauta veikia 5–6 sesijas (apie 180 minučių), kai vienos sesijos trukmė yra apie 30 minučių. Įprastai viena pieno nutraukimo sesija trunka 10–15 minučių, tačiau rekomenduojama jos neužbaigti tol, kol procesas nekelia jums diskomforto ir yra produktyvus.

1. Pasirinkite gaubtelio dydį

Šis nešiojamas MOMCOZY pientraukis turi tik vieną 24 mm silikoninį gaubtelį. Jei pridedamas gaubtelis nėra tinkamas, galite įvairaus dydžio gaubtelių ar specialių įdėklų įsigyti atskirai.

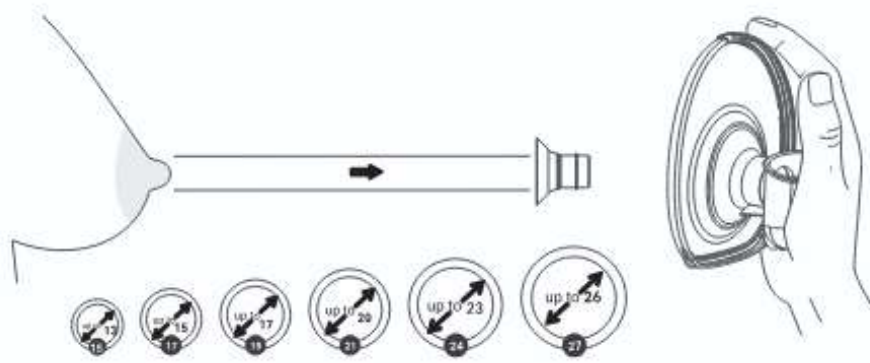

15 pav. Pasirinkite gaubtelio dydį


2. Matavimas

- a) Stimuliuokite spenelį, kad jis pasiektų pilną savo dydį (nepraleiskite šio žingsnio).
- b) Įkiškite spenelį į mažiausią angą, kurioje jis slandžiai telpa.
- c) Pasirinkite skylutę, kuri patogiai apgaubtų spenelio pagrindą.
- d) Išmatuokite pagal dydžių lentelę.

3. Patikrinkite gaubtelio tinkamumą

a) Norint pasirinkti tinkamą gaubtelio dydį, pirmiausia reikia įsitikinti, kad jį dėjote tinkamoje krūtinės vietoje.

b) Spauskite gaubtelį ant krūtinės tol, kol neliks tarpelio. Įsitinkite, kad jūsų spenelis yra gaubtelio viduje.

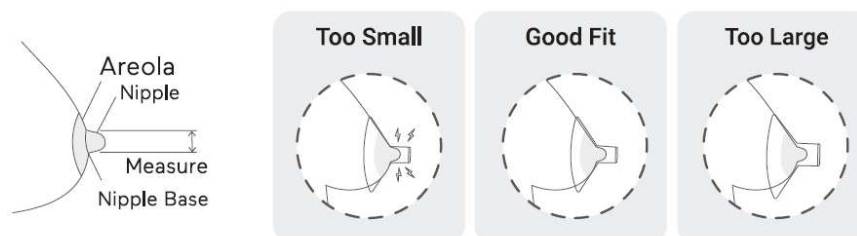


16, 17 pav. Tinkamo gaubtelio parinkimas

Per mažas: jei siurbimo metu jūsų spenelis trinasi į vidinę gaubtelio sienelę, vadinasi, jis jums per mažas.

Tinkamas dydis: jei siurbimo metu jūsų spenelis juda sklandžiai, nesitrina ir neliečia vidinės gaubtelio sienelės, o spenelio aureolė beveik neįsiurbiamo, šis gaubtelis yra jums tinkamo dydžio.

Per didelis: jei siurbimo metu į vidų įtraukiamas didelis plotas spenelio aureolės, šis gaubtelis yra jums per didelis.

4. Tinkamos liemenėlės pasirinkimas

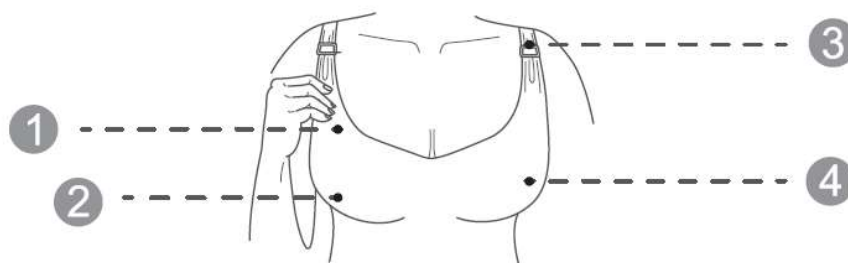



18 pav. Tinkamos liemenėlės pasirinkimas

1 – Pagaminta iš tampraus audinio

2 – Turi atvartą

3 – Nėra apatinės vielos ar paminkštinimo

4 – Visiškai uždengia krūtį

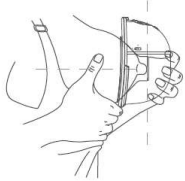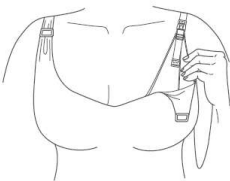 19 pav. Tinkama liemenėlė	 20 pav. Liemenėlės reguliavimas
JOKIŲ TARPŲ Jdėjus pientraukį į liemenėlę, gaubtelis turi būti tvirtai prispaustas prie odos bei jokio tarpo.	LAISVAS JUDĖJIMAS Jei sesijos metu jaučiate, kad pientraukis juda, priveržkite liemenėlės dirželį ir pataisykite pientraukio padėtį. Jei tai nepadeda, rinkitės kitą liemenėlę.


5. Rekomenduojama kūno padėtis



Pientraukio naudojimo sesijos metu visada sėdėkite arba stovėkite tiesiai, kad neištekėtų pienas. Šio pientraukio negalima naudoti gulint ar miego metu, nes nebus išlaikyta tinkama padėtis.

PIENTRAUKIO PADĖTIS

Įsitikinkite, kad pientraukis ir pieno surinkimo talpa visada užima vertikalią padėtį. Padėčiai pasikeitus, pienas gali išsilieti.

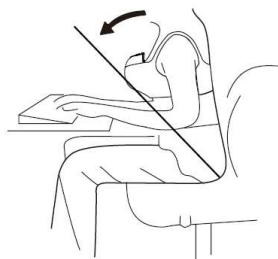

21 pav. Tinkama kūno padėtis pientraukio sesijos metu

8.3.2 Pientraukio surinkimas



Prieš pientraukio surinkimą įsitikinkite, kad visos dalys, kurios turi sąlytį su krūties oda ar pienu yra švarios ir dezinfekuotos.






- Jei dezinfekavote pientraukio dalis karštu vandeniu, jos gali būti labai karštos. Elkitės atsargiai, kad išvengtumėte nudegimų. Rekomenduojame pientraukį surinkti tada, kai dezinfekuotos dalys atvės.

- Prieš pientraukio surinkimą kruopščiai su muilu nusiplaukite rankas, kad išvengtumėte taršos. Surinkimo metu venkite liesti elementų, kurie turi sąlytį su pienu, vidų.

PASTABOS

- Tinkamas dvigubo sandarumo gaubtelio, diafragmos, pieno surinkimo indo, vožtuvo ir kitų elementų surinkimas yra būtinas, kad pientraukis suformuotų vakuumą.
- Prieš kiekvieną pientraukio naudojimą vizualiai patikrinkite visus komponentus. Jei pastebėsite įtrūkimų, įskilimų, įplyšimų, spalvos pakitimų ar kitų pažeidimų, nedelsiant nutraukite naudojimą. Pientraukis nėra tinkamas naudojimui, kol pažeistos dalys nebus pakeistos naujomis.

Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu, o tada surinkite pientraukį, kaip parodyta.

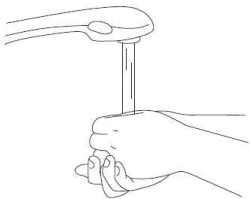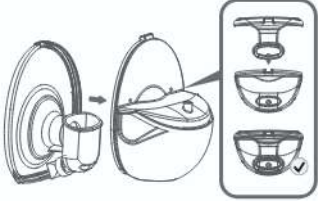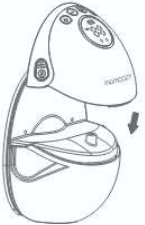 22 pav.	 23 pav.
1. Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu.	2. Sujunkite diafragmą su pieno surinkimo talpa. Švelniai spauskite jos kraštą, kol diafragma gerai priglus.
 24 pav.	 25 pav.
3. Švelniai įstumkite vožtuvą į gaubtelį ir įsitikinkite, kad nėra tarpelių.	4. Kaip parodyta paveikslėlyje, sulygiuokite gaubtelį su pieno surinkimo talpa, kad abu kraštai sutaptų. Įsitikinkite, kad gaubtelis tvirtai prigludo spausdami į jį nykščiais žemyn.
 26 pav.	
5. Sujunkite pieno surinkimo talpą su pientraukio siurbliu.	

Pientraukis yra paruoštas naudoti.

8.3.3 Pientraukio naudojimo instrukcijos

ĮSPĖJIMAS!

- Prieš nuimant pientraukį nuo krūties, visada jį išjunkite, kad pašalintumėte siurbimo metu susidariusį vakuumą.
- Jei pienas nešiskiria, nenaudokite pientraukio ilgiau nei 5 minučių. Pabandykite pakartoti sesiją vėliau.
- Jei pientraukio naudojimas yra nemalonus arba skausmingas, nedelsiant nustokite jį naudoti ir pasikonsultuokite su savo sveikatos priežiūros specialistu.

DĖMESIO!

- Sesijos metu visada stebėkite pieno lygį, kad pieno surinkimo talpa nebūtų perpildyta.

1. Kaip užsidėti pientraukį?


a) Prieš įjungiant pientraukį įsitikinkite, kad jis yra tvirtai ir tinkamai prigludęs (be tarpų).



27 pav. Tinkamas pientraukio prigludimas

b) Norint tinkamai užsidėti pientraukį, gaubtelį reikia laikyti prie krūtinės taip, kad matytumėte, ar jis pateko į vidų. Galite šiek tiek pasilenkti į priekį.

c) Pientraukiui prigludus, įsitikinkite, kad spenelis yra gaubtelio centre. Spenelio galiukas **NETURI** liesti gaubtelio viršaus, šonų ar apačios. Jei taip nutiko, bandykite uždėti pientraukį iš naujo.

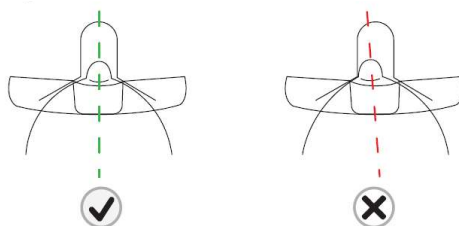


28 pav. ✓ - teisingas prigludimas / pieno išsiskyrimas; x – neteisingas prigludimas / bandykite dar kartą

PASTABOS

- Tinkama spenelio padėtis užtikrina patogumą pientraukio naudojimo sesijos metu ir efektyvų pieno išsiskyrimą. Tinkama spenelio padėtis gaubtelio tunelyje užtikrina patogumą ir leidžia išvengti diskomforto sesijos metu.
- Jei nepavyksta tinkama užsidėti pientraukio, dar kartą peržiūrėkite 7.3.1 šios instrukcijos skyrių.

2. Pientraukio tvirtinimas liemenėje

Liemenėlė padės palaikyti pientraukį tinkamoje padėtyje, ji turi tvirtai prispausti pientraukį prie krūtinės. Jei reikia, suveržkite liemenėlės dirželius, kad pientraukis išliktų savo vietoje.

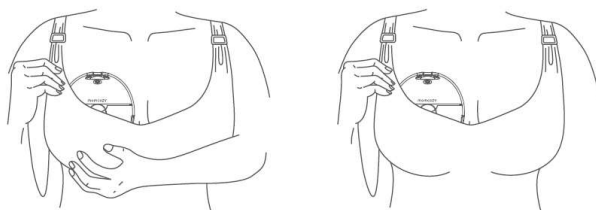

29 pav. Pientraukio tvirtinimas liemenėje

3. Sesijos pradžia

Nedėkite pientraukio tiesiai į liemenėlę. Žingsnis po žingsnio sekite instrukciją, kad pientraukis tinkamai priglustų. Prieš naudojimą atjunkite pientraukį nuo maitinimo adapterio.

a) Įjunkite pientraukį

Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu dėl pientraukio naudojimo sesijos trukmės. MOMCOZY pientraukis automatiškai išsijungia po 30 minučių veikimo.

Pientraukiui įjungti arba išjungti, nuspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtuką.

Norint sustabdyti pientraukį, reikia trumpai spustelėti įjungimo / išjungimo / pauzės mygtuką. Sesijai pratęsti spustelėkite bet kurį pientraukio mygtuką.

- Numatytasis režimas yra mišrus.
- Numatytasis vakuumo lygis yra 1 (naudojimo metu pientraukis rodo lygius LED ekrane).

b) Pasirinkite režimą

Pientraukio veikimo režimai: stimuliacijos, pieno nutraukimo, mišrusis

Pientraukį naudojant pirmą kartą, automatiškai įjungiamas numatytasis režimas (mišrusis režimas, 1 siurbimo lygis).

c) Pasirinkite siurbimo lygį

MOMCOZY pientraukis turi 9 vakuuminio siurbimo lygio nustatymus kiekvienam režimui. Tai leidžia užtikrinti patogumą ir efektyvumą kiekvienos pientraukio naudojimo sesijos metu.

Kai tik pajusite vakuumo susidarymą ant spenelio, spustelėkite + / - mygtukus, kad pasirinktumėte tinkamą siurbimo lygį. Šį nustatymą galite keisti visuose režimuose. LED ekranas išsijungs, jei per 60 sekundžių nebus atlikta jokių nustatymų pakeitimų. Paspaudus bet kurį mygtuką, LED ekranas vėl bus suaktyvintas.

Patarimas: didesnis siurbimo intensyvumas ne visada reiškia didesnį pieno kiekį. Jei spenelis patiria per didelį stresą, pieno išsiskyrimas gali sumažėti. Visada įsitikinkite, kad siurbimo lygis yra komfortiškas. Jei nejaučiate siurbimo, patikrinkite, ar pientraukis surinktas teisingai.



DĖMESIO!

- MOMCOZY pientraukis negali būti naudojamas krovimo metu. Prieš naudojimą visada atjunkite pientraukį nuo maitinimo adapterio ir užverkite įkrovimo angos dangtelį.
- MOMCOZY pientraukio negalima naudoti gulint, atliekant didelių fizinių pastangų reikalaujančius ar pavojingus veiksmus.
- Pientraukio naudojimas neturi sukelti skausmo. Nesirinkite per didelio ar nepatogumą sukeliančio siurbimo lygio. Jei pientraukio naudojimo sesijos metu jaučiate didelį diskomfortą ar skausmą, nedelsiant nutraukite naudojimą, išjunkite pientraukį ir nuimkite jį nuo krūties.

4. Pristabdyti / pradėti sesiją

Norint sustabdyti pientraukį, reikia trumpai spustelėti įjungimo / išjungimo / pauzės mygtuką ir režimo indikatorius pradės mirksėti. Sesijai pratęsti spustelėkite bet kurį pientraukio mygtuką.

5. Išjungimas


Norint išjungti pientraukį, reikia nuspaudus palaikyti įjungimo / išjungimo / pauzės mygtuką (apie 2 sekundes).

Be to, pientraukis automatiškai išsijungs po 30 minučių veikimo.

Pastaba: pristabdžius / pradėjus sesiją iš naujo, režimo ir siurbimo lygio nustatymai nebus panaikinti.

6. Pientraukio nuėmimas

Pirštu pašalinkite vakuumą tarp gaubtelio ir krūties odos. Šiek tiek pasilenkite į priekį ir atsargiai nuimkite pientraukį nuo krūties. Pientraukį laikykite gaubtelio anga į viršų, kad pienas neišsipiltų.

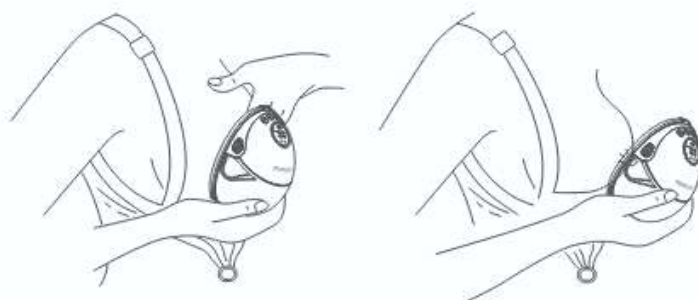


30 pav. Pientraukio nuėmimas

Mes rekomenduojame užbaigti sesiją, kai nutraukto pieno kiekis artėja prie 120 ml – tai padės išvengti pieno surinkimo talpos perpildymo.

7. Pieno perpylimas

Pastaba: neatidarykite pieno išpylimo vožtuvo tiesiogiai, nes taip pienas gali patekti į pagrindinį įrenginį ir jį sugadinti!

Pirmiausia išjunkite pientraukį, atskirkite pagrindinį įrenginį nuo pieno surinkimo indo. Išpilkite pieną tik per pieno išleidimo angą, esančią pieno talpos viršuje. Po pientraukio naudojimo iš karto perpilkite nutrauktą pieną į kitus pieno laikymui skirtus indus su dangteliais arba pieno laikymo maišelius. Tvirtai užsukite dangtelį, kad pienas būtų laikomas saugiai.

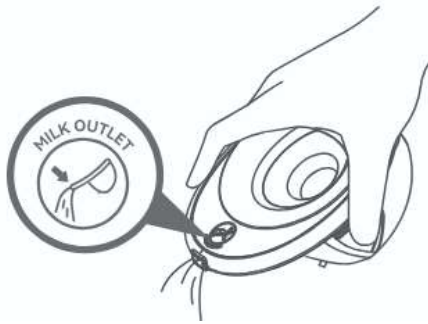

31 pav. Išpilkite pieną pro pieno specialią angą

 ĮSPĖJIMAS!

- Pridedamos pieno surinkimo talpos yra skirtos naudoti pieno nutraukimo sesijų metu. Kūdikiui maitinti ar pienui saugoti naudokite kitas talpas, užsukamas dangteliais.
- Nutrauktą pieną iš karto atvėsinkite arba užšaldykite ir 2–4 valandas prieš kūdikio maitinimą laikykite 16–25 °C temperatūroje.

8.4 Kaip laikyti motinos pieną?

8.4.1 Tinkamas motinos pieno laikymas

Siekiant užtikrinti nutraukto motinos pieno kokybę ir saugumą kūdikio sveikatai, būtina paisyti žemiau pateiktų rekomendacijų. Čia pateikiamos bendrosios gairės, kaip laikyti nutrauktą motinos pieną skirtingoje temperatūroje. Motinos pieno kokybei įtakos gali turėti įvairūs veiksniai: pieno kiekis, aplinkos temperatūra, temperatūros svyravimai šaldytuve ir šaldiklyje, aplinkos švara.

Kaip laikyti nutrauktą motinos pieną?

- Jei įmanoma, atvėsinkite ir atšaldykite pieną iš karto po nutraukimo. Jį galima laikyti šaldytuve, aušintuve ar izoliuotoje aušinimo talpoje arba užšaldyti mažais kiekiais (2–4 uncijos), kad vėliau galėtumėte panaudoti kūdikio maitinimui.
- Nutrauktam motinos pienui laikyti naudokite specialius maišelius ar švarius indus, skirtus maistui laikyti. Įsitikinkite, kad talpos yra pagamintos iš stiklo arba plastiko ir turi sandarius dangtelius.
 - Venkite naudoti talpas, paženklintas simboliu „7“, kuris nurodo, kad indas gali būti pagamintas iš plastiko, kuriame yra SPA.
- Pašalinkite orą prieš užsandarinant talpą.
- Pieno maišelius paguldykite horizontaliai, kad jie tolygiai užšaltų. Jei maišelius dedate keliais aukštais, atskirkite juos popieriniu rankšluosčiu, kad jie nesuliptų tarpusavyje.
- Niekada nelaikykite motinos pieno vienkartinuose buteliukų įdėkluose ar plastikiniuose maišeliuose, kurie nėra skirti motinos pienui laikyti.
- Švelniai pasukiokite indą, kad išsiskaidytų grietinėlės sluoksnis, kuris gali pakilti į viršų. Stipriai nepurtykite talpos su motinos pienu – tai gali suardyti kai kuriuos vertingus motinos piene esančius junginius.

- Šviežiai nutrauktas pienas gali būti laikomas:

Motinos pieno tipas	Laikymo vieta ir temperatūra		
	Stalviršis 77 °F (25 °C) arba žemesnė temp. (kambario temperatūra)	Šaldytuvas 40 °F (4 °C)	Šaldiklis 23 °F (-5 °C) arba žemesnė temp.
Ką tik nutrauktas motinos pienas	Tinka vartoti 2–4 val.	Tinka vartoti 24 val.	Tinka vartoti 3 mėn.
Atšildytas (anksčiau užšaldytas) motinos pienas	Suvartoti per 2 val. po kūdikio maitinimo		

Šios rekomendacijos yra skirtos tik sveikiems, išnešiotiems kūdikiams ir gali skirtis, jei kūdikis gimė neišnešiotas arba turi tam tikrų ligų. Dėl tikslių rekomendacijų kreipkitės į savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.

Patarimai, kaip laikyti motinos pieną

- Ant kiekvienos laikymo talpos aiškiai pažymėkite pieno nutraukimo datą. Jei pieną perduodate vaiko sveikatos priežiūros specialistams, ant talpos nurodykite savo vaiko vardą.
- Nelaikykite motinos pieno šaldytuvo ar šaldiklio durelėse – tai padės apsaugoti pieną nuo temperatūros pokyčių atidarant ir uždarant duris.
- Jei manote, kad per 4 dienas nesunaudosite šviežiai nutraukto motinos pieno, nedelsiant jį užšaldykite. Tai padės užtikrinti motinos pieno kokybę.
- Motinos pieno šaldymas:
 - o Naudokite nedideles talpas, kad nešvaistytumėte pieno, kurio kūdikis neišgėrė. Rinkitės 2–4 uncijų talpas arba vienam maitinimo reikalingo pieno kiekio talpas.
 - o Talpos viršuje palikite maždaug vieną colį, nes šaldamas motinos pienas plečiasi.
- Keliaujant galima motinos pieną laikyti nešiojamame šaldytuve su užšaldytais ledo paketais iki 24 valandų. Atvykę į paskirties vietą, pieną iš karto sunaudokite, įdėkite į šaldytuvą arba užšaldykite.

8.4.2 Saugus motinos pieno atšildymas

- Visada pirmiausia atšildykite seniausią motinos pieną. Prisiminkite šią taisyklę: pirmas įdėtas į šaldiklį, pirmas išimtas. Tai labai svarbu, nes laikui bėgant motinos pieno kokybė gali pablogėti.

- Yra keletas būdų atšildyti motinos pieną:

- o per naktį palaikyti šaldytuve;
 - o įdėti į indą su šiltu ar drungnu vandeniu;
 - o palaikyti po drungnu tekančiu vandeniu.
- Niekada neatšildykite ir nešildykite motinos pieno mikrobangų krosnelėje. Mikrobangų krosnelė gali sunaikinti motinos piene esančias maistines medžiagas ir sukurti karštųjų taškų, kurie gali sukelti nudegimus kūdikio burnoje.

- Atšildžius motinos pieną šaldytuve, jį būtina suvartoti per 24 valandas. Pradėkite skaičiuoti šį terminą nuo tada, kai motinos pienas bus visiškai atitirpęs, o ne nuo jo ištraukimo iš šaldiklio.
- Kai motinos pienas atšils iki kambario temperatūros, jį būtina suvartoti per 2 valandas.
- Niekada pakartotinai neužšaldykite motinos pieno, jei jis jau buvo atšildytas.

9. LAIKYMO SĄLYGOS

9.1 Kaip laikyti pientraukį?

- Saugokite pientraukį nuo tiesioginių saulės spindulių. Pientraukį ir jo priedus laikykite saugioje, švarioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Ilgalaikis sandėliavimas: įkraukite pientraukio bateriją, kad pailgintumėte jo tarnavimo laikotarpį. Laikykite pientraukį ir jo priedus vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Jei pientraukio kurį laiką nenaudosite, švariai išplaukite ir nuvalykite visas jo dalis.
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki 60 °C / -4 iki 140 °F.
- Santykinė oro drėgmė: 15–90 %.
- Aplinkos slėgis: nuo 90 iki 106 kPa.

Įprastai pientraukiui sušilti iki minimalios laikymo temperatūros ir (arba) atvėsti nuo maksimalios laikymo temperatūros reikia apie 30 min. Tuomet jį bus galima naudoti kaip įprasta.

9.2 Pientraukio transportavimas

Keliaudami pientraukiui įkrauti naudokite pridedamą įkrovimo laidą ir pritaikykite jį prie tinkamo maitinimo šaltinio pagal savo buvimo vietą. Prieš lipant į lėktuvą, pasitarkite su oro linijų bendrove dėl galimybės nešti pientraukį į lėktuvo saloną ar naudoti jį skrydžio metu. Laikykitės laikymo sąlygų:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki 60 °C / -4 iki 140 °F.
- Santykinė oro drėgmė: 15–90 %.
- Aplinkos slėgis: nuo 90 iki 106 kPa.

10. SPECIFIKACIJA

Modelio nr.	BP311
Pavadinimas	Nešiojamas belaidis pientraukis
Galios reikalavimai	Įvestis: 100-240 Vac, 50-60 Hz Išvestis: 5 V = 1 A (įkrauti pridedamu USB 2.0 / Type C įkrovimo laidu ir savarankiškai įsigyti maitinimo adapteriu)
Galingumas	Įėjimo: 5 V = 1 A
Maitinimas	DC 3,7 V / 1350 mAh įkraunama ličio baterija
Galia	5 W
Režimai	Stimuliacijos, pieno nutraukimo ir mišrusis
Vakuumo diapazonas	Stimuliacija: -75 to -145 (±5) mmHg Pieno nutraukimas: -120 to -295 (±5) mmHg Mišrusis: -75 to -295 (±5) mmHg
Sesijos trukmė	Stimuliacijos režimas 70~88 (±2) ciklų/min. Pieno nutraukimo režimas: 27~60 (±2) ciklų/min. Mišrusis režimas: 56-82 (±2) ciklų/min.
Pientraukio matmenys	130x114x73 mm
Svoris (su visais priedais)	287 g

Naudojimo trukmė	500 val.
Garso lygis	≤50 dB
Apsauga nuo elektros smūgio	Vidinė maitinimo įranga
Apsaugos nuo elektros smūgio lygis	BF tipo dalys (pieno surinkimo rinkinys)
Naudojimo sąlygos:	Temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C; oro drėgmė: 15 % iki 90 %, atmosferos slėgis: 70 kPa to 106 kPa
Transportavimas ir sandėliavimo aplinka	Temperatūra: -20 °C to 60 °C; oro drėgmė: 15 % to 90 %, atmosferos slėgis: 70 kPa to 106 kPa
Baterijos įkrovimo laikas	150 min.
Baterijos naudojimo laikas	180 min.

11. PRIEŽIŪRA IR DALIŲ KEITIMAS

Įrenginio viduje nėra dalių, kurios reikalauja vartotojo priežiūros. Atidarius įrenginio korpusą ar jį sugadinus, garantija nustoja galioti. Jei įrenginį reikia taisyti, vartotojas turi jį grąžinti medicinos įrangos įmonei arba tiesiogiai mažmeninės prekybos atstovui ar gamintojui. Draudžiama atlikti bet kokias modifikacijas.

Pagal atskirą prašymą gamintojas gali suteikti informacijos apie jungimo schemas, sudedamąsias dalis, jų aprašymus, kalibravimo instrukcijas ar kitą informaciją, kuri padės tokius įrenginius taisantiems specialistams atlikti kokybišką įrenginio dalių, kurias gamintojas nurodė kaip taisytinas, remontą.

Ilgesnį laiką nenaudojamas įrenginys lėtai išsikraus. Norint apsaugoti bateriją nuo pažeidimų dėl ilgalaikės žemos įtampos, rekomenduojama profilaktiškai įkrauti nenaudojamą įrenginį kartą per tris mėnesius.



ĮSPĖJIMAS!

Įrenginyje naudojama ličio baterija. Ją gali pakeisti tik tinkamų žinių ir įgūdžių turintys specialistai. Netinkamas baterijos keitimas gali būti pavojingas. Nevalykite ir neatlikite kitų priežiūros darbų su įrenginiu jo naudojimo arba įkrovimo metu.

12. ATITIKTIES DEKLARACIJA

ES atitikties deklaracija: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. Šiuo pareiškimu pareiškama, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias LVD direktyvos 2014/35/ES ir EMC direktyvos 2014/30/ES nuostatas.

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Sprendimas
Pientraukis neveikia	- Jei pienas dar nepradėjo tekėti, apsvarstykite galimybę palikti pientraukį ant krūties ilgesniam laikui. Pienas gali pradėti tekėti vėliau. Pastaba: pradinis pieno išsiskyrimo laikas yra unikalus kiekvienai mamai ir priklauso nuo daugybės veiksnių. - Patikrinkite, ar pientraukis uždėtas tinkamai, pristabdykite jo veikimą ir nuimkite jį nuo krūties. Iš naujo tinkamai uždėkite pientraukį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. - Gali būti, kad naudojate netinkamo dydžio krūties gaubtelį (žr. 7.3)

	Naudojimo instrukcijos – Pasirinkite gaubtelio dydį).
Pienas neteka	- Pristabdykite pientraukio veikimą ir nuimkite jį nuo krūties. Iš naujo tinkamai uždėkite pientraukį (žr. 7.3 Naudojimo instrukcijos). - Atskirkite ir iš naujo tinkamai sujunkite pientraukį su krūties gaubteliu. Nukreipkite krūties spenelį į gaubtelio tunelį ir leiskite jam tinkamai priglusti (žr. 7.3 Naudojimo instrukcijos).
Reikalingas suderinimas	- Pristabdykite pientraukio veikimą ir nuimkite jį nuo krūties. Iš naujo tinkamai uždėkite pientraukį (žr. 7.3 Naudojimo instrukcijos). - Atskirkite ir iš naujo tinkamai sujunkite pientraukį su krūties gaubteliu. Nukreipkite krūties spenelį į gaubtelio tunelį ir leiskite jam tinkamai priglusti (žr. 7.3 Naudojimo instrukcijos).
Diskomfortas pientraukio naudojimo sesijos metu	- Jei pientraukio naudojimo metu jaučiate didelį diskomfortą, pamėginkite atlikti šiuos veiksmus (prieš tai patikrinkite, ar pientraukį uždėjote tinkamai, kaip nurodyta 7.3 Naudojimo instrukcijos): - o stimuliacijos fazės metu stipriai prispauskite MOMCOZY pientraukį prie krūties; - o priveržkite liemenėlės dirželius ir įtikinkite, kad MOMCOZY pientraukis tvirtai laikosi prigludęs prie krūties; - o sumažinkite siurbimo intensyvumą; - o iš naujo tinkamai pridėkite pientraukį prie krūties; - o sutrumpinkite pientraukio naudojimo laiką (MOMCOZY pientraukis automatiškai išsijungia po 30 minučių); - o įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą krūties gaubtelio dydį (žr. 7.3 Naudojimo instrukcijos – Pasirinkite gaubtelio dydį). Jei šie patarimai nepadėjo sumažinti patiriamo diskomforto, nedelsiant nutraukite pientraukio naudojimą ir kreipkitės į sveikatos priežiūros arba žindymo specialistą.
Sumažėjęs (per mažas) siurbimas	- Šis pientraukis turi 9 siurbimo lygius. Siurbimo intensyvumą galite keisti paspaudę mygtukus +/- (padidinti / sumažinti). - Patikrinkite pientraukio elementų kokybę – kai kuriuos jų reikia keisti po 3 mėn. naudojimo laikotarpio. - Jei aukščiau aprašyti žingsniai nepadeda, pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: 1. Patikrinkite jungtis tarp visų plaunamų dalių ir įsitikinkite, kad jos sujungtos tinkamai ir saugiai. 2. Vizualiai patikrinkite visas plaunamas dalis ir, jei pastebėjote pažeidimų, pakeiskite jas naujomis. 3. Patikrinkite, ar įrenginys yra įjungtas ir tinkamai įkrautas. 4. Tvirtai prispauskite pientraukį prie krūties.
Pientraukio sustabdymas	- Pientraukis automatiškai išsijungia po 30 minučių veikimo laiko. - Trumpai nuspaudus įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas pientraukio veikimas bus pristabdytas. Spustelėjus mygtuką pakartotinai, pientraukis vėl pradės veikti.
Pientraukis neišsijungia	- Paspauskite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtuką. - Jei problema išlieka, panaikinkite vakuumą įkišant pirštą tarp krūties ir gaubtelio. Tada paspauskite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtuką, kad išjungtumėte pientraukį.

Pientraukis arba maitinimo adapteris sušlapo (buvo panardinti vandenyje)	- Nedelsiant išdžiovinkite pientraukį. Pastatykite jį vertikaliai, maitinimo adapterio prievadu žemyn (siurbimo valdikliais aukštin) ir leiskite džiūti per naktį. Nenaudokite pientraukio ir jo nekraukite artimiausias 24 valandas. - Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
Pientraukis nesikrauna	- Įsitikinkite, kad naudojate C tipo standartinį maitinimo adapterį (jis nėra pridedamas). Patikrinkite, ar maitinimo adapteris yra tinkamai prijungtas prie pientraukio įkrovimo prievado.

Pastaba: jei aukščiau aprašyti metodai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su platintoju / pardavėju. Kontaktinę informaciją rasite paskutiniajame šios instrukcijos puslapyje.

14. UTILIZAVIMAS



Pasibaigus pientraukio tarnavimo laikui, neišmeskite jo į buitinių atliekų konteinerį. Įrenginį ir jo bateriją reikia nunešti į elektroninės įrangos surinkimo perdirbimui tašką. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali turėti žalingą poveikį aplinkai. Netinkamas jų utilizavimas gali lemti kenksmingų toksinų, pavojingų žmogaus sveikatai, kaupimąsi ore, vandenyje ir dirvožemyje. Privalu tinkamai utilizuoti įrenginį. Dėl detalesnių utilizavimo instrukcijų kreipkitės į savo savivaldos institucijos atstovą.

15. GARANTIJA

Jei turite nusiskundimų dėl pientraukio veikimo, kreipkitės tiesiogiai į platintoją / pardavėją. Kontaktinę platintojo / pardavėjo informaciją rasite prekės įsigijimo dokumente.

Garantijos galiojimo sąlygos

1. Pientraukiui suteikiame dviejų metų garantiją. Garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įsigijimo datos. Garantinio reikalavimo atveju pirkėjas turi pateikti pirkimo datą pagrindžiančius dokumentus – čekį arba sąskaitą faktūrą.
2. Garantinis remontas nepratęsia įrenginio ar jo dalių garantijos laikotarpio.
3. Garantija netaiko atvejams, kai:
 - a. žala atsirado dėl netinkamo pientraukio naudojimo;
 - b. vartotojas nesilaikė gamintojo rekomendacijų;
 - c. veikimo sutrikimų atsirado dėl kliento ar trečiųjų šalių atlikto remonto ar modifikacijų;
 - d. žala buvo padaryti gabenimo iš gamintojo metu ar transportuojant įrenginį į aptarnavimo centrą;
 - e. susidėvėjo priedai, kurių susidėvėjimas yra natūralus ir įprastas;
 - f. pažeidimai padaryti ardant įrenginį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius įrenginio sukeltus nuostolius net ir tuo atveju, jei įrenginio sugadinimas yra pripažįstamas garantiniu įvykiu.

16. EMC INFORMACIJA

Dėl savo funkcionalumo pientraukis yra skirtas naudoti namuose ar sveikatos priežiūros įstaigos aplinkos sąlygomis.

Esminis funkcionalumas

Specifinė funkcija	Patvirtinimo / nepatvirtinimo kriterijai	Nustatymas / metodas
Vakuumo stiprumas (paklaida: ± 5 mmHg)	Siurbimo lygis (stimuliacijos režimas): 52–113 mmHg Siurbimo lygis (pieno nutraukimo režimas): 105–240 mmHg Siurbimo lygis (miršusis režimas): 52–240 mmHg	Vakuumo manometras Stebėjimas
Ciklo greitis (ciklai/min.) (paklaida: ± 2 ciklai/min.)	Siurbimo lygis (stimuliacijos režimas): 50-120 Siurbimo lygis (pieno nutraukimo režimas): 23-57 Siurbimo lygis (miršusis režimas): 6-16	Stebėjimas
Maksimalus vakuumas	290 mmHg	Vakuumo manometras Stebėjimas
Programinė įranga pientraukio slėgio reguliavimui	290 mmHg	Vakuumo manometras Stebėjimas
Atbulinio srauto prevencijos mechanizmas	Esant didžiausiam vakuumui nuotėkio nėra	Stebėjimas

Jei dėl elektromagnetinių trikdžių vakuumas prarandamas arba pablogėja pientraukio veikimas, tai gali lemti įrenginio funkcijos praradimą arba sukelti sužalojimą. Prašome perskaityti toliau pateiktą svarbią informaciją, kad išvengtumėte galimų elektromagnetinių trikdžių.



ĮSPĖJIMAS!

- Laikykitės pientraukį atokiau nuo mobiliojo telefono, mikrobangų krosnelės, HF chirurginės įrangos, magnetinio rezonanso aparato ar kitų radijo dažnį spinduliuojančių įrenginių – tai gali sukelti gedimą.
- Venkite naudoti ar įkrauti pientraukį šalia kitų įrenginių, nes tai gali sukelti netinkamą veikimą. Jei toks naudojimas yra būtinas, privalu stebėti pientraukio ir kitos įrangos veikimą, kad įsitikintumėte, jog visi įrenginiai veikia tinkamai.
- Nešiojamoji RF ryšio įranga (įskaitant išorinius įrenginius, pavyzdžiui, antenos laidus ar išorines antenas turi būti naudojama ne arčiau kaip 30 cm (12 colių) nuo bet kurios MOMCOZY nešiojamo belaidžio pientraukio M6 dalies, įskaitant gamintojo nurodytus laidus. Priešingu atveju galimi pientraukio veikimo sutrikimai.
- Naudojant kitus pientraukio priedus, keitiklius ir kabelius, nei pridėti ar nurodyti gamintojo, gali padidėti elektromagnetinis spinduliavimas arba sumažėti pientraukio elektromagnetinis atsparumas, dėl to įrenginys gali veikti netinkamai.



DĖMESIO!

- 1) Apsauga, apsauga nuo vagystės ir radijo dažnio atpažinimo (RFID) įrenginių. Kai kurios elektromagnetinės apsaugos nuo vagysčių sistemos ir metalo detektoriai, pavyzdžiui, naudojami prie įėjimų ar išėjimų iš prekybos centrų, bibliotekų ir kitų viešų vietų, taip pat oro uosto saugumo patikros įrenginiai gali turėti neigiamos įtakos MOMCOZY nešiojamo belaidžio pientraukio M6 veikimui. Nenaudokite MOMCOZY nešiojamo belaidžio pientraukio netoliese

minėtos įrangos. Be to, RFID įrenginiai, kurie dažnai naudojami identifikavimo ženkleliams nuskaityti, taip pat kai kurie žymų išjungimo įrenginiai, pavyzdžiui, naudojami parduotuvių kasose ar bibliotekose išduodant knygas, taip pat gali turėti neigiamos įtakos MOMCOZY nešiojamo belaidžio pientraukio M6 veikimui. Venkite naudoti MOMCOZY nešiojamą belaidį pientraukį M6 netoliese minėtos įrangos. Jei negalite išvengti buvimo prie aprašytos įrangos ir naudojate MOMCOZY nešiojamą belaidį pientraukį, artėjant prie jos pientraukį išjunkite. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite savo MOMCOZY pientraukio veikimą ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai.

- 2) Naudojant trumpųjų, mikrobangų diatermiją arba gydomąją ultragarsinę diatermiją (toliau – diatermija) ir elektrokauterinius prietaisus netoliese pientraukio, gali atsirasti jo veikimo sutrikimų ar sumažėti veikimo intensyvumas. Nenaudokite MOMCOZY nešiojamo belaidžio pientraukio netoliese šios įrangos.

Kabelių sąrašas ir didžiausias kabelių ilgis

Pavadinimas	Ilgis	Apsauga	
Įkrovimo kabelis	800±10 mm	-	
Naudojimo gairės ir gamintojo elektromagnetinės emisijos deklaracija MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis yra skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Tinkamą naudojimo aplinką privalo užtikrinti įrenginio naudotojas.			
Emisijos testas	Atitiktis	Elektromagnetinės aplinkos gairės	
Laidieji ir spinduliuojami radijo dažniai CISPR 11	Grupė 1 Klasė B	MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis naudoja R energiją tik savo vidinei funkcijai. Jo radijo dažnių spinduliuotė yra labai maža ir greičiausiai nesukels jokių trikdžių netoliese esančiai elektroninei įrangai.	
Laidieji RD spinduliai CISPR 11	Grupė 1 Klasė B	MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis tinka naudoti visose gydymo įstaigose, patalpose, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie viešojo mažos įtampos elektros tiekimo tinklo, skirto naudoti buitiniams reikmėms, išskyrus aukšto dažnio chirurginės įrangos skyrius ir RF procedūrų patalpose, skirtose magnetinio rezonanso tomografijai.	
Harmonizuotos emisijos IEC 61000-3-2	Klasė A		
Įtampos svyravimai / mirgėjimas IEC 61000-3-3	Atitiktis		
Naudojimo gairės ir gamintojo elektromagnetinio atsparumo deklaracija MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis yra skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Tinkamą naudojimo aplinką privalo užtikrinti įrenginio naudotojas.			
Atsparumo testas	IEC 60601-1-2 testo lygis	Atitikties lygis	Nurodymai elektromagnetinei aplinkai
Elektrostatinė iškrova IEC 61000-4-2	±8kV kontaktas; ±2kV; ±4kV; ±8kV; ±15kV oras	±8kV kontaktas; ±2kV; ±4kV; ±8kV; ±15kV oras	Grindys turi būti dengtos mediena, betonu ar keraminėmis plytelėmis. Jei grindys yra dengtos sintetinė danga, santykinė oro drėgmė turi būti ne mažiau 30 proc.
Radiuoti RF EM laukai IEC 61000-4-3	10V/m (sveikatos priežiūra namuose, lauko aplinkoje), 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM esant 1 kHz	10V/m (sveikatos priežiūra namuose, lauko aplinkoje), 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM esant 1 kHz	
Greitieji elektriniai tranzitai / sprogimai IEC 61000-4-4	±2kVAC galios tiekimo linijos;	±2kVAC galios tiekimo linijos	Energijos tiekimo kokybė turėtų būti tokia pati kaip ir

	±1 kV nuolatinės srovės maitinimo / signalų linijos; 100 kHz pasikartojimo dažnis		namų sveikatos priežiūros aplinkoje
Viršįtampis IEC 61000-4-5	±0.5i/ ±1kV linija į liniją; ±0.5kV, ±1kV, ±2kV linija į žemę	±0.5i/ ±1kV linija į liniją	Energijos tiekimo kokybė turėtų būti tokia pati kaip ir namų sveikatos priežiūros aplinkoje
Laidieji trikdžiai, kuriuos sukelia RF laukai IEC 61000-4-6	3V 0,15MHz – 80MHz, 6V ISM dažnis tarp 0,15 MHz ir 80MHz 80 % AM esant 1kHz	3V 0,15–80 MHz, 6V ISM ir radijo mėgėjų dažnis tarp 0,15 MHz ir 80MHz 80 % AM esant 1 kHz	Energijos tiekimo kokybė turėtų būti tokia pati kaip ir namų sveikatos priežiūros aplinkoje
Pastaba: ISM (pramonės, mokslo ir medicinos) dažniai tarp 0,15 MHz ir 80 MHz yra nuo 6 765 MHz iki 6 795 MHz; nuo 13 553 MHz iki 13 567 MHz; nuo 26 957 MHz iki 27 283 MHz; ir 40,66 MHz iki 40,70 MHz. Mėgėjų radijo dažniai yra nuo 0,15 MHz iki 80 MHz yra nuo 1,8 MHz iki 2,0 MHz, nuo 3,5 MHz iki 4,0 MHz, nuo 5,3 MHz iki 5,4 MHz, nuo 7 MHz iki 7,3 MHz, nuo 10,1 MHz iki 10,15 MHz, nuo 14 MHz iki 14,2 MHz, nuo 18,07 MHz iki 18,17 MHz, nuo 21,0 MHz iki 21,4 MHz, 24,89 MHz – 24,99 MHz, 28,0 MHz – 29,7 MHz ir 50,0 MHz – 54,0 MHz.			
Vardinės galios dažnio magnetiniai laukai IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz ar 60Hz	30A/m 50Hz	Tiekimo dažnio magnetiniai laukai turi būti tokio paties lygio, koks būdingas namų sveikatos priežiūros aplinkai
Įtampos kritimai IEC 61000-4-11	0% UT 0,5 ciklo 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ir 315° kampuose; 0% UT 1 ciklas ir 70 % UT, 25/30 ciklo Vienfazė: esant 0°	Taikoma	Energijos tiekimo kokybė turėtų būti tokia pati kaip ir namų sveikatos priežiūros aplinkoje
Įtampos pertrūkiai IEC 61000-4-11	0% U _T , 250/300 ciklas	Taikoma	Energijos tiekimo kokybė turėtų būti tokia pati kaip ir namų sveikatos priežiūros aplinkoje
PASTABA: UT yra kintamosios srovės tinklo įtampa prieš taikant bandomąjį lygį. Pvz.: 25/30 reiškia 25 periodus esant 50 Hz arba 30 periodų esant 60 Hz.			
Naudojimo gairės ir gamintojo elektromagnetinio atsparumo deklaracija MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis yra skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Tinkamą naudojimo aplinką privalo užtikrinti įrenginio naudotojas.			
Atsparumo testas	IEC 60601-1-2 testo lygis	Atitikties lygis	Elektromagnetinės aplinkos gairės
RF belaidžio ryšio įrangos artumo laukai IEC 61000-4-3	Žr. toliau pateiktą lentelę	Atitinka	
Artimieji magnetiniai laukai IEC 61000-4-39	Žr. toliau pateiktą lentelę	Atitinka	

Bandymų specifikacijos dėl KORPUSO PRIEŠINGUMO RF belaidžiams ryšio įrenginiams

Dažnio testas (MHz)	Juosta (MHz) a)	Paslauga ^{a)}	Modifikacija	Atsparumo testo lygis (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Impulsų modifikacija b) 18 Hz	27
450	430-470	GMRS460, FRS 460	FM ^{c)} ±5 kHz nukrypimas 1 kHz sinusas	28
710	704-787	LTE band 13, 17	Impulsų modifikacija b) 217 Hz	9
745				
780				
810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE band 5	Impulsų modifikacija b) 18 Hz	28
870				
930				
1720	1700-1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900; DECT; LTE band1, 3, 4, 25; UMTS	Impulsų modifikacija b) 217 Hz	28
1845				
1970				
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE juosta 7	Impulsų modifikacija b) 217 Hz	28
5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Impulsų modifikacija b) 217 Hz	9
5500				
5785				

PASTABA: jei būtina pasiekti ATSPARUMO BANDYMO LYGĮ, atstumas tarp siųstuvo antenos ir MEEQUIPMENT arba MESYSTEMS gali būti sumažintas iki 1 m. 1 m bandymo atstumas yra leidžiamas pagal IEC 61000-4-3.

a) Kai kuriems paslaugų tipams įtraukti tik pakilimo dažniai.

b) Nešiklis turi būti moduluojamas naudojant 50 % darbo ciklo stačiakampio bangos signalą.

c) Kaip alternatyva FM modifikacijai, nešiklis gali būti modifikuojamas impulsais, naudojant 50 % darbo ciklo stačiakampio bangos signalą 18 Hz dažniu. Nors tai nėra tikroji modifikacija, tai būtų blogiausias atvejis.

Bandymų specifikacijos dėl korpuso prievado atsparumo artimiesiems magnetiniams laukams

Bandymo dažnis	Modifikacija	Atsparumo testo lygis (A/M)
300 kHz ^{a)}	CW	8
134.2 kHz	Impulsų modifikacija ^{b)} 2.1 kHz	65 ^{c)}
13.56 MHz	Impulsų modifikacija ^{b)} 50 kHz	7.5 ^{c)}

a) Šis testas taikomas tik MEEQUIPMENT ir MESYSTEMS, skirtoms naudoti namų sveikatos priežiūros aplinkoje.

b) Nešiklis turi būti modifikuojamas naudojant 50 % darbo ciklo stačiakampio bangos signalą.

c) Efektyvusis (r.m.s.) prieš taikant moduliaciją.

17. NAUDOJIMAS KELIONIŲ METU IR TARPTAUTINIAI REIKALAVIMAI

MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis M6 gali būti paveiktas išorinių aplinkos veiksnių. Keliaujant ar skrendant lėktuvu aplinkos pokyčiai gali būti staigūs ir sunkiai nuspėjami, todėl prašome nenaudoti įrenginio.

MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis M6 gali būti naudojamas įvairiose šalyse, tačiau jį būtina naudoti ir laikyti pagal šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus ir rekomendacijas. Prašome įsitikinti, kad jūsų maitinimo adapterio įvesties įtampa yra AC 100-240V 50/60 Hz, o išvesties įtampa yra DC 5V 1A. Taip pat įsitikinkite, kad turite keitiklį, kad užtikrintumėte tinkamą įtampą pagal tikslinės šalies standartus.

Kelionės ar transportavimo metu MOMCOZY nešiojamas belaidis pientraukis M6 gali būti neigiamai paveiktas. Prieš naudojimą būtinai jį patikrinkite pagal žemiau pateiktus žingsnius – tai leis įsitikinti, kad pientraukis gali veikti tinkamai.

- Patikrinkite ar pientraukio korpusas, dalys neturi pažeidimų.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite pientraukį ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai.
- Jei pastebėjote kokių nors pažeidimų ar defektų, nedelsiant nutraukite pientraukio naudojimą.

18. GAMINTOJO INFORMACIJA

Gamintojas: Lute Technology Co., Limited, Honkongas

19. FCC ATITIKTIS

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šį prietaisą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį.

Jo veikimas galimas laikantis šių dviejų sąlygų: (1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis prietaisas gali priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą jo veikimą.

Pastaba: šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio reikalavimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie reikalavimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Šis prietaisas generuoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei jis nėra pastatytas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžių nebus konkrečiame prietaise.

Jei šis prietaisas sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti jį išjungiant ir įjungiant, rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeičiant priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinant atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijungiant prietaisą prie kito elektros tinklo lizdo nei prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.